

口腔筋機能トレーナー T4K[®]



混合歯列期における
不正咬合の早期治療



T4K TRAINER



- ① トゥースチャンネル…前歯を整列させます。
- ② タンタグ……………舌を積極的に訓練します。
- ③ タンガード……………舌突出しを止めます。
- ④ リップバンパー……………頤筋の活性を抑えます。
- ⑤ クラス I 切端咬合…機能性装置と同じです。
- ⑥ 翼状ベース……………TM関節を脱力させます。

●スターティングトレーナー

ソフトタイプ（ブルー、グリーン、クリア） 装着期間：約6～8ヶ月

●フィニッシングトレーナー

ハードタイプ（ピンク、レッド、クリア） 装着期間：約6～12ヶ月

- 口呼吸、舌癖、逆嚥下などの口腔筋機能癖を矯正
- 口腔筋機能癖の矯正による顔貌と歯列の改善

※使用時間は毎日
日中1時間と就寝時です。

使用開始




13ヶ月後



ニュータイプ

NEW T4K TRAINER ソフトタイプ（ブルー、グリーン）

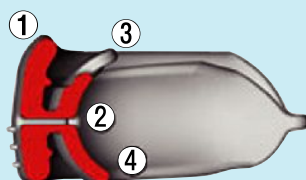

- ① 耐久性とアーチ発達のために全体を厚くしています。
- ② 上下顎のオフセットは大臼歯関係を改善し、破損を防止します。
- ③ 舌位をより良くするため、タンタグの形が改良されました。
- ④ 上下顎のオフセットは以前の切端咬合から、クラス I 咬合になりました。

医療機器認証番号 220AKBZX00107000